

SA-2100A、2200E：微电脑控制、300×4100mm 空间设置
2200E：内置活性炭滤芯、过程微电脑管理

蒸馏水·离子交换水制造装置

Automatic Water Distillation Apparatus




SA-2100A

■操作部



SA-2200E

- 安全性、附属功能充实，简单易使用的蒸馏水制造装置。
- 从原水供应到蒸馏水储存都为自动控制。
- 运行状态、水质、警告和异常内容都在显示器上显示。
- 配备锅炉水自动排水、停水检测、加热器过热检测、漏水检测、冷却水自动调节等功能。
- 为减少水垢附着在加热器上，配备了软水树脂盒。

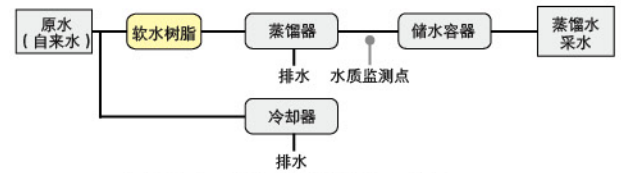

4-023-1 蒸馏水製造装置 P66

型号	SA-2100A	
产品代码No.	182230	
制水方式	蒸馏	
性能	制水种类	蒸馏水
	制水能力	约1.8L/h
	取水速度	1.5L/min; 满水容量Max.10L
机能	安全机能	断水监测、加热器过热监测、漏水监测、漏电、过电流保护
	附属机能	蒸馏器自动排水、冷却水自动调整
构成	蒸馏器	超硬质玻璃
	加热器	陶瓷加热器 1.4kW
	水质计	数字显示(温度自动补偿 at 25°C); 电导率/电阻率的显示
	前处理过滤器	软水树脂
规格	储水容器	聚乙烯材质; 规格150W×330D×480H(mm); 容量10L
	原水	自来水
	自来水压力范围	49.0~490kPa(0.5~5.0kg/cm ²)
使用环境温度范围	5~35°C	
外部尺寸(mm)	300W×410D×700H; 储水容器安装时460W×410D×700H	
重量	约27kg	
电源电压	AC100V·15A·1.5kVA·50/60Hz	

型号	SA-2200E	SA-2200E-UV
产品代码 No.	280580	280590
采水方式	离子交换 - 蒸馏 - 过滤	
采取纯水	离子交换水·蒸馏水	
蒸馏水制造能力	约 1.8L/h	
蒸馏水采取量	3L/min (Max.20L / 次)	
蒸馏水采水量设定	0.1~30.0L (0.1L 单位) 或 10~9990mL (10mL 单位)	
离子交换水采取量	约 0.5~1L/min	
离子交换水采取量设定	0.1~100.0L (0.1L 单位)	
原水压力使用范围	49.0 ~ 490kPa(0.5 ~ 5.0kg/cm ²)	
原水必要水量	约 2.3L/min 以上	
蒸馏水储水量显示	数值(以 1L 为刻度)和条形图显示 蒸馏器: 超硬质玻璃	
蒸馏器	超硬质玻璃	
加热器	陶瓷加热器 1.4kW	
水质测量仪	数字显示(温度自动修正 at 25°C) 比抵抗 / 电导率(可切换)	
原水过滤器	前处理滤芯 1个	
最终过滤器	中空纤维过滤器(蒸馏水、离子交换水)各 1个	
水槽用空气过滤器	1个(活性炭、钠石灰、PTFE 滤膜)	
离子交换树脂	离子交换高压筒式 树脂量 3L	
UV 杀菌灯	—	UV 高压筒
蒸馏水储水槽	聚乙烯制 30L	
外形尺寸(mm)	600×660×780	
电源	AC100V 50/60Hz 15A、1.5kVA	

■各种机能

2100A·An 型	2200E·E-UV 型
断水检测、加热器过热检测、防止加热器空烧、漏水检测、漏电与过电流阻、防止固定金属飞沫、锅炉自动排水、冷却水自动调整	
—	高压筒交换时间显示水、总采水量显示

浓缩·减压装置
冷却水循环装置
冷冻·喷雾干燥机
干燥箱·马弗炉
搅拌机·振荡器
有机合成装置
投入式冷却器·冷却箱
定量送液泵
液相色谱
培养·培养相关装置