

可提供安心清洁的研究环境 不必担心飞溅、冒烟、火灾等安全隐患

带加热磁力搅拌 铝块恒温槽

SynFlex™

Dry Block Bath with Stirrer BBS+RCH RCH型+BBS型

NEW

出色的耐热性、耐腐蚀性、耐磨损性带搅拌功能的铝块恒温槽



RCH-1000+BBS-230RB



RCH-1000+BBS-3HLD

RCH型

- 标配的温度传感器，可以控制样品温度。
- 陶瓷涂层的加热板具有出色的耐热性、耐腐蚀性、耐磨损性，远红外线效果最高到达温度为310℃。
- 温度和转速显示一目了然。通过大旋钮可进行转速设定，确认方便，再现性强。

BBS型

- 丰富的配件可供选择，配合不同的研究课题，可进行自由地组合。
- 品种多样的加热铝块可根据试剂瓶等玻璃容器的热胀冷缩进行自动调节。
- 为了提高铝块的耐腐蚀性，采用了白耐酸铝涂层处理，有2个地方配有温度传感器插孔(φ3.2mm)。

HIP+HIP-HEAD2型
催化剂筛选



BBS-3HLD型
回流试验



手机“扫一扫”
浏览更多产品和促销信息。

产品名称	加热板磁力搅拌器
型号	RCH-1000
产品代码No.	264286
旋转速度范围	50~1500rpm(无负荷时)
搅拌容量	20L(水)
温度调节范围	室温~310℃(置物盘温度)
马达	DC无刷电机 输出25W
加热器	600W
搅拌合材质·尺寸(mm)	铝合金、陶瓷涂层·直径135
外部尺寸·质量	165W×285D×90Hmm·3kg
电源输入·额定电源	3.2A、630VA·AC220V 50/60Hz



SynFlex用铝槽 BBS-130AB型

根据容器可选用不同铝槽，最新推出了更加丰富的铝槽可供选择。铝槽内加入铝球，可以使用不同外形的容器。




防滑脱装置

防止烧瓶、三角瓶等反应容器从搅拌台上脱落发生烫伤危险而设计的防滑脱装置。

产品代码No.264720

■ 配套指南

容量：5~5000mL(BBS型+RCH-1000型)

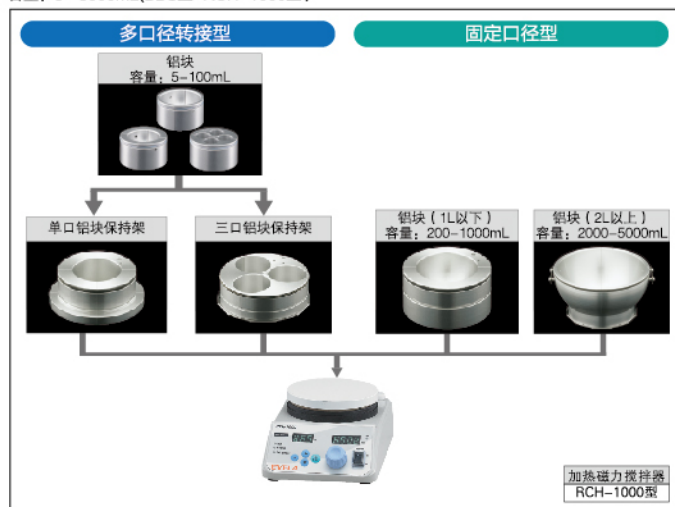

■ 试剂瓶用铝块·铝块保持架选定表

容 量 格	试剂瓶		圆底试剂瓶		反应容器
	ISO规格	JIS规格	ISO规格	JIS规格	
Φ 12mm × 8	—	—	—	—	BBS-12T8I
Φ 24mm × 4	—	—	—	—	BBS-24T4I
Φ 60mm	—	—	—	—	BBS-60TI
5mL	—	—	BBS-30RI	—	—
10mL	—	BBS-32RI※1	BBS-30RI	BBS-32RI※1	—
20mL	—	BBS-35RI※2	—	—	—
25mL	—	—	BBS-41RI	BBS-45RI※1	—
30mL	—	BBS-41RI※1	—	—	—
50mL	BBS-56EI※1	BBS-51RI※3	BBS-51RI	BBS-53RI※1	—
100mL	BBS-60EI※1	BBS-61RI※3	BBS-64RI※1	BBS-65RI※1	—
单口铝块保持架	BBS-1HLD				—
三口铝块保持架	BBS-3HLD				—

※单口铝块保持架使用时，选用常用搅拌子：选用三口铝块保持架时，选用椭圆形、微球形、长型搅拌子，搅拌速度请使用400rpm以上

■ 多口径转接型

5~100mL的少量用铝块和铝块保持架组合



产品名称	尺寸	型号	产品代码
试管用铝块	Φ 12 × 8	BBS-12T8I	239940
	Φ 24 × 4	BBS-24T4I	239920
	Φ 50	BBS-50TI	248840
	Φ 60	BBS-60TI	239930
试剂瓶用铝块	Φ 30	BBS-30RI	239830
	Φ 32	BBS-32RI	239840
	Φ 35	BBS-35RI	239850
	Φ 41	BBS-41RI	239860
	Φ 45	BBS-45RI	239870
	Φ 51	BBS-51RI	239880
	Φ 53	BBS-53RI	239890
	Φ 56	BBS-56EI	240960
	Φ 60	BBS-60EI	240970
	Φ 64	BBS-64RI	239900
	Φ 65	BBS-65RI	239910
	Φ 75	BBS-75FI	245790
单口铝块保持架	BBS-1HLD	239810	—
三口铝块保持架	BBS-3HLD	239820	—

EYELA

东京理化器械株式会社

东京都文京区小石川1-15-17. TN小石川大厦6层


TEL: +81-3-6757-3378 FAX: +81-3-3868-6571

埃朗科技国际贸易（上海）有限公司

上海分公司 上海市长宁区延安西路1088号长峰中心2906室
 北京分公司 北京市朝阳区门外大街10号昆泰大厦1502A室
 广州分公司 广州市天河区体育东路羊城国际商贸中心东塔1501室
 成都分公司 成都市青羊区顺城大街306号凯乐广场9N室
 西安分公司 西安市碑林区文艺北路金色城市3栋1单元2706室
 沈阳分公司 沈阳市铁西区兴华南街5号鲁尔大厦1927室
 武汉联络处 武汉市洪山区光谷时代广场B座2006室
 济南联络处 济南市历下区龙奥北路海信龙奥九号4号楼2017室

*由于产品需要不断的改良，因此这里所配产品的规格有时会有变动，敬请理解。
 *由于本产品简介是印刷品，因此所配产品的颜色有时会与实物有少许差异，敬请理解。

容量：5~500mL(BBS型+RCH-3型)

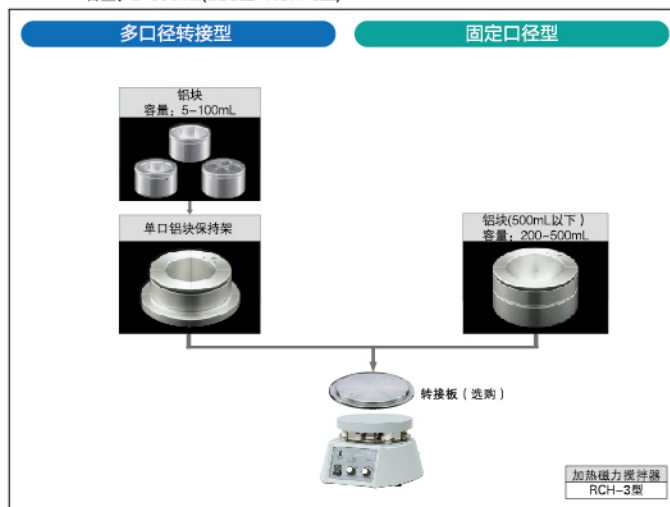

■ 铝块选定表

容 量 格	试剂瓶		圆底试剂瓶	
	ISO规格	JIS规格	ISO规格	JIS规格
200mL	—	BBS-76EB	—	BBS-80RB
250mL	BBS-80RB	—	BBS-85RB	—
300mL	—	BBS-85RB	—	BBS-93RB
500mL	BBS-100EB	BBS-100EB	BBS-105RB	BBS-108RB
1000mL	—	BBS-133EB	BBS-131RB	BBS-135RB
2000mL	—	BBS-166RB	BBS-166RB	BBS-170RB
3000mL	—	—	BBS-185RB	BBS-200RB
4000mL	—	—	BBS-207RB	—
5000mL	—	—	BBS-223RB	BBS-230RB

■ 固定口径型

适用于容量为2000~5000mL的试剂瓶用铝块



产品名称	尺寸	型号	产品代码
试剂瓶用铝块	Φ 76	BBS-76EB	239950
	Φ 80	BBS-80RB	240370
	Φ 85	BBS-85RB	240380
	Φ 93	BBS-93RB	240390
	Φ 100	BBS-100EB	239960
	Φ 105	BBS-105RB	240400
	Φ 108	BBS-108RB	240410
	Φ 131	BBS-131RB	240420
	Φ 133	BBS-133EB	239970
	Φ 135	BBS-135RB	240430
	Φ 166	BBS-166RB	239980
	Φ 170	BBS-170RB	239990
	Φ 185	BBS-185RB	240000
	Φ 200	BBS-200RB	240010
	Φ 207	BBS-207RB	240020
	Φ 223	BBS-223RB	240030
	Φ 230	BBS-230RB	240040



有关安全的
注 意 事 项

为了使您安全地使用本产品，在使用之前，
请仔细阅读《使用说明书》

Tel: 021-62076878/31 62107271
 Tel: 010-84264221/28
 Tel: 020-38871910 38264610
 Tel: 028-86511719
 Tel: 029-87852182
 Tel: 024-25630740
 Tel: 027 8705 2918
 Tel: 0531-55551640

Fax: 021-62076920
 Fax: 010-84264233
 Fax: 020-38871930
 Fax: 028-86511803
 Fax: 029-87852182
 Fax: 024-2563074
 Fax: 027 8705 2918
 Fax: 0531-55551640

邮编: 200052
 邮编: 100020
 邮编: 510620
 邮编: 610031
 邮编: 710054
 邮编: 110023
 邮编: 430074
 邮编: 250000

RCH-1000-170406.SYYX.C