

为旋转蒸发仪配套使用而设计

全新型 隔膜真空泵

Diaphragm Vacuum Pump NVP-1000(V) · 2000(V) · 2100(V)型

- 便于和旋转蒸发仪统一配套，整个系统都为厂家配套生产。
- 1000型可以达到30L/min、10hPa的标准型。2000型可以达到44L/min、10hPa的大排量型、适合于大型装置的减压。2100型可以达到30L/min、2hPa的高真空型、适用于高沸点试料的浓缩。
- 节约实验室放置空间，搬运移动带有内藏式扳手。
- 操作简易方便，不会产生油回真空泵进水换油的麻烦。
- 根据用途设置了排气速度转换开关（HIGH·LOW）设计。HIGH为高速排气时使用、LOW为静音减压时使用
- 标准配备了气振阀，打开气振阀时可以把抽进隔膜泵内的有机溶剂通过气振阀排出，可以有效的保护隔膜泵，降低膜片的损耗。
※气振阀打开时真空度会受影响下降。
- NVP型系列产品可以另配溶媒回收装置使用，排气过程中可以对溶媒进行二次回收。
- V型为变频型真空泵，噪音更低，可以与真空控制器NVC-3000直接连接使用，比普通型更快到达设定真空度。

NEW



NVP-1000 (V)



NVP-2000 (V)



NVP-2100 (V)



手机“扫一扫”
浏览更多产品和促销信息。



■ 对于溶剂回收装置

NVP型可以和溶剂回收装置DPE-1150·2150·1250D型组合使用。DPE型可以进行真空度控制、隔膜泵排气口的溶剂蒸气可以进行冷凝回收。



■ 真空控制器一体化

隔膜真空泵和真空控制器一体化设计。便于移动,可以有效的利用实验台和通风橱的空间。便于连接各种蒸馏装置。

隔膜泵电源可以通过真空控制器连接,自动控制隔膜真空泵启停。

隔膜真空泵与真空控制器NVC-3000组成变频型真空控制系统,适用于旋转蒸发仪等仪器的减压操作。

产品名称		隔膜真空泵						
型号		NVP-1000	NVP-1000V	NVP-2000	NVP-2000V	NVP-2100	NVP-2100V	
产品代码No.		266006	270296	266017	270300	266027	270310	
性能	排气速度(HIGH·LOW)	30L/min·20L/min			44L/min·30L/min		30L/min·20L/min	
	到达真空度	10hPa(约7.5Torr)					2hPa(约1.5Torr)	
	变频控制	否	是	否	是	否	是	
安全功能		马达异常检知						
构成	马达	输出90W						
	减压模式	2段		2段×2		4段		
规格	接液部材质	特氟龙、PPS、Kalrez; 具有强耐酸碱性能						
	吸排气接口	外径10mm管子(吸·排气嘴方向任意可变); 排气口配置消音器; 吸气系统配有气镇阀						
使用环境温度范围		5~40°C						
外部尺寸(mm)		138(177)W×206(260)D×180H			138(177)W×206(260)D×252H			
质量		约6kg		约8kg		约8kg		
电源输入		0.5A、100VA			0.9A 200VA			
电源电压		AC220V 50Hz						

※性能在室温20°C、额定电源电压、50Hz、无负荷、干燥状态下的测定值。

※() 的尺寸含凸起物。

※膜片属于消耗品。




NVC-3000

真空控制器固定板(NVP-V型用)
产品代码No. 270100

真空控制器NVC-3000型

NVP-1000V·2000V·2100V
可用连接线直接连接真空控制器VC-3000,根据溶剂选择适合的真空度自动进行控制。
产品代码No. 269376

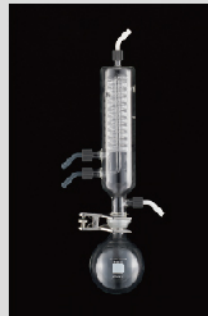

排气回收装置

隔膜真空泵
排气回收装置
包含部件: 冷凝器、回收瓶(300mL)、接口、夹子

产品代码No. 261460

冷凝器固定配件
产品代码No. 262970

NVP型用夹具(冷凝器固定用)
产品代码No. 262960

EYELA

东京理化器械株式会社

东京都文京区小石川1-15-17. TN小石川大厦6层

TEL: +81-3-6757-3378 FAX: +81-3-3868-6571

埃朗科技国际贸易(上海)有限公司

上海分公司 上海市长宁区延安西路1088号长峰中心2906室
北京分公司 北京市朝阳区门外大街10号昆泰大厦1502A室
广州分公司 广州市天河区体育东路羊城国际商贸中心东塔1501室
成都分公司 成都市青羊区顺城大街306号凯乐广场9N室
西安分公司 西安市碑林区文艺北路金色城市3栋1单元2706室
沈阳分公司 沈阳市铁西区兴华南街5号鲁尔大厦1927室
武汉联络处 武汉市洪山区光谷时代广场B座2006室
济南联络处 济南市历下区龙奥北路海信龙奥九号4号楼2017室

Tel: 021-62076878/31 62107271
Tel: 010-84264221/28
Tel: 020-38871910 38264610
Tel: 028-86511719
Tel: 029-87852182
Tel: 024-25630740
Tel: 027 8705 2918
Tel: 0531-55551640

有关安全的
注意事项

为了您安全地使用本产品, 在使用之前,
请仔细阅读《使用说明书》

*由于产品需要不断的改良, 因此这里所载产品的外观, 规格有时会有变动。敬请理解。
*由于本产品简介是印刷品, 因此所载产品的颜色有时与实物有少许差异。敬请理解。

NVP.170408.SYYX.C